

Infinity 1031

Generatore di azoto

Numero dell'articolo: 13-1270




Descrizione

L'Infinity 1031 fornisce azoto ad alta purezza e aria secca per alimentare i sistemi Sciex LC-MS. L'Infinity 1031 è una soluzione senza compressore e necessita di una fonte d'aria per funzionare. Con poche parti mobili, questo generatore ha requisiti minimi di manutenzione e può funzionare 24 ore al giorno per disporre di azoto senza problemi.



Tipi di applicazione

1 x SCIEX LC-MS/MS

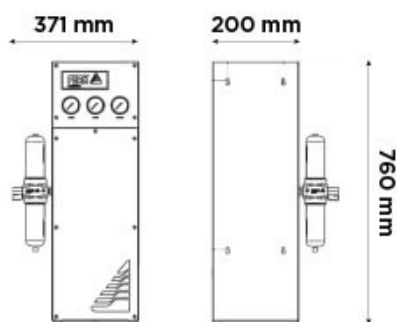

Generator Details

- **Tipo di gas:** Azoto, Aria
- **Compressore integrato:** No

Caratteristiche principali

- In grado di fornire la maggior parte dei sistemi Sciex LC-MS/MS
- Funzionamento 24/7 con prestazioni ottimali
- Il gas viene fornito su richiesta, quindi il generatore funziona secondo i tuoi programmi
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Richiede una configurazione minima
- Funzionamento completamente silenzioso
- Garanzia on-site completa di 12 mesi

Specifiche tecniche

	Generatore di azoto Infinity 1031
Tipo di gas	Azoto
Flusso massimo di gas:	19
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	26L/min
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	25L/min
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Pressione di ingresso minima:	120psi/8,3bar
Pressione di ingresso massima:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	115
Qualità minima dell'aria in ingresso:	1.4.1
Tempo di avvio:	30 mins
Voltaggio:	N/A
Frequenza:	N/A
Corrente:	N/A
Temperatura operativa massima:	30°C / 86°F
Particelle:	<0.01 µm
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	760 x 365 x 200 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	29,9 x 14,4 x 7,9 inches
Peso del generatore	14kg / 30,8lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

