

Generatore d'aria zero CG15L

Applicazione: Zero Air, Ultra Zero Air, Aria libera da CO2


Numero dell'articolo: 43-1010 (230V) - UK | 43-1020 (230V) - EU | 43-1030 (110V) - US



Descrizione

Molte applicazioni di laboratorio, come le applicazioni per le emissioni nell'aria, richiedono gas di calibrazione. Per soddisfare questi requisiti, Peak Scientific ha prodotto il CG15L che genera aria zero rimuovendo anidride carbonica, metano e umidità dall'aria per applicazioni che richiedono prestazioni superiori rispetto ai modelli zero air.

- **Tipo di gas** Aria
- **Compressore integrato:** No
- **Tipi di applicazione:** Zero Air, Ultra Zero Air, Aria libera da CO2

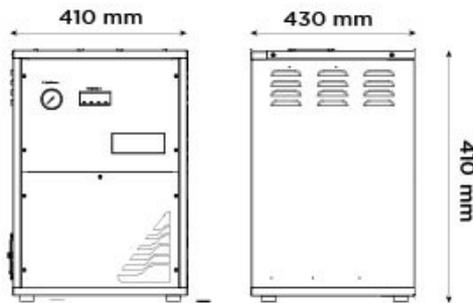

Caratteristiche principali

- Produce aria di laboratorio pulita e secca, assicura un'alimentazione ottimale per generatori di gas e strumenti
- Fornitura continua di gas di taratura
- Soddisfa i requisiti della specifica del registro federale 40CFR 86.114-79
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Funzionamento completamente silenzioso
- Può essere supportato dal compressore d'aria di precisione
- Installazione minima richiesta 12 mesi di garanzia completa in loco

Specifiche tecniche

	Generatore d'aria zero CG15L
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	15L/min
Purezza massima:	<0.1ppm
Raccordo uscite gas:	1x 1/4" BSP Female
Pressione di ingresso minima:	100psi/6,9bar
Pressione di ingresso massima:	125psi/8,6bar
Tempo di avvio:	30 mins
Consumo di energia:	1100/540 W
Voltaggio:	120 / 220 V ±10%
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	2.6 / 5.2 A
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	410 x 410 x 430 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	16,1 x 16,1 x 16,9 inches
Peso del generatore	58kg / 127,6lbs

[PEAK Protected]TM

I generatori di gas Peak Scientific definiscono il punto di riferimento in termini di affidabilità, praticità e prestazioni nei laboratori di tutto il mondo e sono coperti da una garanzia di 12 mesi. Oltre questo periodo, tuttavia, puoi assicurarti che il tuo investimento continui a essere **[protetto]** dalla nostra copertura completa per la cura dei generatori.

I nostri pacchetti di assistenza post-assistenza di prim'ordine offrono un programma di manutenzione preventiva programmata, assicurandoti al contempo un accesso immediato al supporto tecnico mondiale e una risposta prioritaria in loco in caso di guasto prematuro.

- Per ordinare parti visitare: www.peakscientific.com/ordering/
- Per i piani di servizio visita: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific Italia
t: +44 141 812 8100
Per un elenco completo dei nostri in tutto il mondo sedi degli uffici, visitare:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003