

Corona Nitrogen 1010

Numero dell'articolo: 81-4000
(110v/230v)



Descrizione

Il nostro Corona 1010 è stato progettato per soddisfare le specifiche del rilevatore di aerosol caricato Thermo Scientific Corona Veo.

Questo sistema può essere acquistato come singola unità di azoto per laboratori con alimentazione d'aria esterna o con compressore d'aria impilabile per laboratori senza alimentazione d'aria esterna. Il sistema Corona è adatto anche per una varietà di altre applicazioni, che richiedono fino a 5 L/min di azoto per LC, HPLC o UHPLC.



Tipi di applicazione


Thermo Fisher Scientific Corona Veo CAD, Dionex ERS/Vanquish CAD

Generator Details

- **Tipo di gas:** Azoto
- **Compressore integrato:** No

Caratteristiche principali

- Adatto per applicazioni che richiedono azoto di elevata purezza
- Disponibile con o senza compressore esterno
- Soluzione dedicata per gli strumenti Corona e Vanquish di Thermo Scientific
- La comprovata tecnologia a membrana fornisce azoto di qualità da laboratorio
- Il gas viene fornito su richiesta, quindi il generatore funziona secondo i tuoi programmi Garanzia completa in loco di 12 mesi

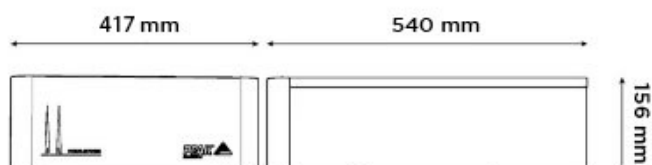

Specifiche tecniche

	Corona Azoto 1010
Tipo di gas	Azoto
Flusso massimo di gas:	5L/min
Pressione massima in uscita:	80psi/5,5bar
Pressione massima in uscita:	80psi/5,5bar
Purezza massima:	>98%
Pressione di ingresso minima:	110psi/7,6bar
Pressione di ingresso massima:	130psi/9bar
Min Air Inlet Flow:	30
Qualità minima dell'aria in ingresso:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1
Tempo di avvio:	5 mins
Consumo di energia:	up to 23 VA
Voltaggio:	100- 230 V
Frequenza:	50 / 60
Corrente:	0.1 A
Potenza termica:	up to 78 BTU
Temperatura operativa massima:	35°C / 95°F
Particelle:	<0.1µm
Livello di rumore:	0
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	156 x 417 x 540 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	6,1 x 16,4 x 21,3 inches
Peso del generatore	12kg / 26,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

